

PRODUCT CATALOGUE

- Thermoplastic Splint **NEW YOGIPS PLUS, NEW YOGIPS**
- Synthetic casting tape **HYGIA CAST**
- Synthetic splint **HYGIA SPLINT**





대한민국 최고(最古) 열가소성 부목

30년간 선택 받은 YOGIPS가 새로이 태어났습니다.

- 재성형 가능
- 특수실 소재 사용으로 벨크로 밴드의 확실한 고정력
- Flat or Premold 타입 선택 가능
- 통기성이 우수한 Air-Mesh 소재
- 2~3분 내외의 신속한 몰딩 시간으로 수술실 및 응급실에서 사용 최적화
- 제품 모델별 사이즈 다변화로 손쉬운 Premold 타입 처치 가능
- 제품 사용 완료 후, 몰딩으로 폐기물 부피 최소화



Thermoplastic
Splint

NEW YOGIPS PLUS

• Thumb hole radial splint
Short arm SA200 [좌 | 우]

Code : K8-107-124




Size

특대 | **대** | **중** | 소 | 특소



• Thumb spica radial splint
Short arm SA220 [좌 | 우]

Code : K8-107-124

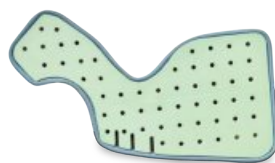

Size

특대 | **대** | **중** | **소** | **특소**




• Volar splint
**Short arm SA300 볼라
[좌 | 우]**

Code : K8-107-124

Size

특대 | **대** | **중** | **소** | **특소**

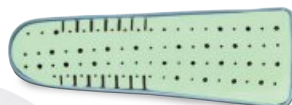

• Ulnar gutter splint
**Short arm SA300 엘나
[좌 | 우]**

Code : K8-107-124

Size

특대 | **대** | **중** | **소** | **특소**



• Finger splint
Short arm SA1000

Code : K8-107-124

▪ Universal Size




• Wrist neutral palmar splint
Short arm SA420 [좌 | 우]

Code : K8-107-124

Size

특대 | **대** | **중** | **소** | 특소

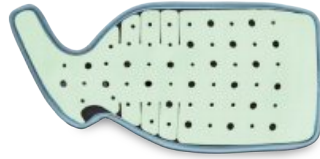


• Forearm humerus splint
Long arm LA500

Code : K8-103-124

Size

특대 | **대** | **중** | **소** | 특소

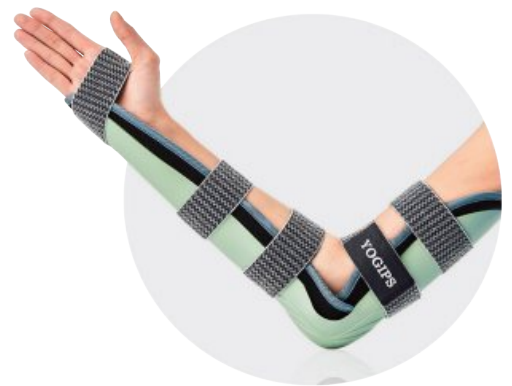

• Tibial splint (below knee)
Short leg SL600

Code : K8-109-124

Size

특대 | **대** | **중** | **소** | 특소



• Tibial splint (below knee)
Short leg SL600

Code : K8-109-124

Size

특대 | **대** | **중** | **소** | 특소



- Femoral splint (above knee)

Long leg LL700

Code : K8-104-124

Size

특대 | 대 | 중 | 소 | 특소



- Cylinder splint

Long leg LL740

Code : K8-104-124

Size

특대 | 대 | 중 | 소 | 특소



몰딩 시간

NEW YOGIPS PLUS NEW YOGIPS	부분몰딩	완전몰딩	굳는시간
Short Arm	1분	1 ~ 1분 30초	1분
Long Arm	2분	3분	2분
Short Leg	2분	3분	2분
Long Leg	3분	5분	3분

수상 및 인증



장영실상



FDA



CE



ISO 13485:2016



기업부설연구소




기술혁신 중소기업
(Inno-Biz)



수출유망중소기업

히팅기 사용방법

1. 온도 조절기를 90 ~ 100°C 사이에 고정 후, 제품을 넣고 전원 스위치를 켭니다.
2. 약 2 ~ 3분 후 제품을 꺼내어 환자 환부에 처치하고, 탄력 붕대를 감아줍니다.
3. 제품이 식어 굳은 후 탄력 붕대를 제거하고, 자사 스트랩으로 고정합니다.

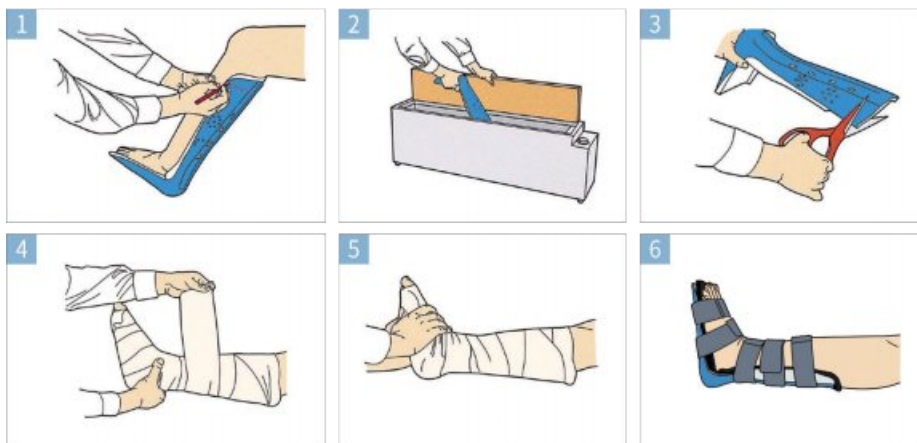

히팅기 제원 및 휴즈 교환

전압 및 온도	220V/60Hz MAX 110°C
대형	107cm(가로) × 24cm(세로) × 34cm(높이) 22kg
소형	90cm(가로) × 24cm(세로) × 32cm(높이) 16kg

1. 전원코드를 빼고 **기계 뒤편 코드선 옆에 퓨즈홀더**가 있습니다.
2. 왼쪽으로 돌려서 **퓨즈를 꺼내어 예비 퓨즈로 교환**해 주세요.



[교환방법 동영상 QR]



히팅기전자파 인증서

• 제품의 모든 원료와 부자재가 순수 국내 생산, 기술입니다. •



Thermoplastic
Splint

NEW YOGIPS

- Thumb hole radial splint
Short arm HSA200 [좌|우]
Code : K8-104-001

Size

특대 | 대 | 중 | 소 | 특소



- Thumb spica radial splint
Short arm HSA220 [좌|우]
Code : K8-104-001

Size

특대 | 대 | 중 | 소 | 특소



- Volar splint
Short arm HSA300 블라
[좌|우]
Code : K8-104-001

Size

특대 | 대 | 중 | 소 | 특소



- Ulnar gutter splint
Short arm HSA300 엘나
[좌|우]
Code : K8-104-001

Size

특대 | 대 | 중 | 소 | 특소



• Wrist neutral palmar splint
Short arm HSA420 [좌 | 우]

Code : K8-104-001

Size

특대 | 대 | 중 | 소 | 특소



• Forearm humerus splint
Long arm HLA500

Code : K8-104-003

Size

특대 | 대 | 중 | 소 | 특소



• Tibial splint (below knee)
Short leg HSL600

Code : K8-104-002

Size

특대 | 대 | 중 | 소 | 특소



• Femoral splint (above knee)
Long leg HLL700

Code : K8-104-004

Size

특대 | 대 | 중 | 소 | 특소



• Cylinder splint
Long leg HLL740

Code : K8-104-004

Size

특대 | 대 | 중 | 소 | 특소



Synthetic
casting tape


HYGIA CAST



• 재 질: 폴리, 스판, 유리, 소프트폴리

• 사이즈: - 1" × 1.8m
- 2" × 3.6m
- 3" × 3.6m
- 4" × 3.6m
- 5" × 3.6m

• 색 상:

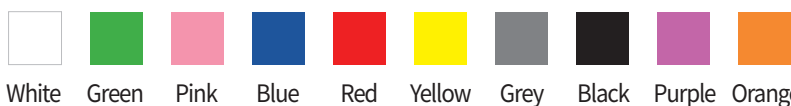

캐스트 사용방법

• 용 도: 골절 및 탈골 부위에 원하는 모형으로 감아주어 손상된 뼈의 접합을 돕고 손상된 근육 및 인대를 보호합니다.



Synthetic
splint

HYGIA SPLINT

- 재 질 : 폴리, 유리
- 타 입 : Pre-cut, Roll
- 사이즈 :




Code No.	Description of goods	Size	Shipping Q'ty
WS-1011	Hygia Splint (Pre-cut)	5cm × 25cm	1CTN (10boxes of 5pcs)
WS-1012	Hygia Splint (Pre-cut)	7.5cm × 30cm	1CTN (10boxes of 5pcs)
WS-1021	Hygia Splint (Pre-cut)	10cm × 37.5cm	1CTN (10boxes of 5pcs)
WS-1022	Hygia Splint (Pre-cut)	7.5cm × 87.5cm	1CTN (6boxes of 5pcs)
WS-1031	Hygia Splint (Pre-cut)	10cm × 75cm	1CTN (6boxes of 5pcs)
WS-1032	Hygia Splint (Pre-cut)	12.5cm × 75cm	1CTN (6boxes of 5pcs)
WS-1041	Hygia Splint (Pre-cut)	12.5cm × 112.5cm	1CTN (6boxes of 5pcs)
WS-1051	Hygia Splint (Roll)	5cm × 450cm	1CTN (6boxes)
WS-1052	Hygia Splint (Roll)	7.5cm × 450cm	1CTN (6boxes)
WS-1053	Hygia Splint (Roll)	10cm × 450cm	1CTN (6boxes)
WS-1054	Hygia Splint (Roll)	12.5cm × 450cm	1CTN (6boxes)
WS-1055	Hygia Splint (Roll)	15cm × 450cm	1CTN (6boxes)

- 용 도 : 골절 환자의 응급처치, 가벼운 골절 및 염좌 부위를 안전하게 고정, 지지합니다.

• Pre-cut type



• Roll type

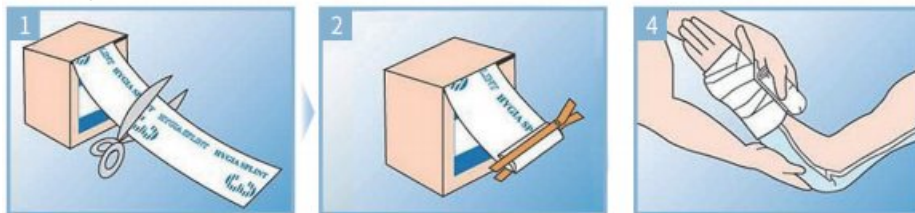

스프린트 사용방법



우삼의료기(주)
WOOSAM MEDICAL

본사 및 공장

경기도 파주시 월롱면 통일로642번길 89-25 (10945)

서울사무소

서울시 종로구 대학로12길 4 (03086)

TEL. 02-743-0781 | FAX. 02-744-4779

E-MAIL. woosam0781@gmail.com | WEBSITE. www.woosam.co.kr